

BRUKSANVISNING
Revaxør® Olje ørespray

BRUKSOMRÅDER

Revaxør Olje ørespray er en pleiende øreolje til bruk i den ytre øregangen som forebygger forekomst av vokspropp i øret. Revaxør Olje ørespray fukter også huden i øregangen og reduserer dermed kløe og irritasjon forårsaket av tørr hud.

IKKE BRUK REVAXØR® OLJE DERSOM

- øret er betent eller smertefullt
- det væsker fra øret
- ørets trommehinne er skadet, sprukket eller har vært punktert (f.eks. dren)
- du er allergisk (overfølsom) overfor noen av innholdsstoffene i Revaxør Olje

SÆRSKILTE BRUKERGRUPPER

Hvis du har koordinasjonsproblemer, problemer med å bevege deg eller skjelvende hender, be noen andre om å dosere Revaxør Olje i øregangen din.

Barn: Revaxør Olje bør ikke brukes til barn under ett år uten å konsultere lege.

Brukere av høreapparat: Dersom du bruker høreapparat, sett det på plass etter at Revaxør Olje er absorbert, altså når øret føles tørt.

MULIGE BIVIRKNINGER

Revaxør Olje ørespray har ingen kjente bivirkninger. Bruk av øresprayer, slik som Revaxør Olje, kan gi følelsen av ubehag eller smerte i øret.

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger av Revaxør Olje.

For å rapportere enhver alvorlig hendelse, kontakt produsenten og myndighet (Markedsovervåking av medisinsk utstyr, Tlf. +47 22 89 77 00) i landet hvor brukeren er. Dette er viktig for den pågående overvåkingen av nytte/risikoforholdet til produktet.

DOSERINGSINSTRUKSER

Forebygging av vokspropp i øret: Spray 1-2 doser av Revaxør Olje ørespray inn i øregangen én gang i uken. Regelmessig bruk av Revaxør Olje ørespray forhindrer forekomst av vokspropp. Revaxør Olje kan brukes så lenge som nødvendig.

Behandling av tørrhet og kløe i øregangen: Spray 1-2 doser av Revaxør Olje ørespray inn i øregangen én gang i uken eller ved behov. Revaxør Olje kan brukes så lenge som nødvendig.

SLIK BRUKER DU REVAXØR® OLJE

1. Varm flasken med Revaxør Olje i hånden i noen minutter slik at innholdet får kroppstemperatur (omtrent 37°C).
2. **Før første gangs bruk,** spray ut i luften eller f.eks. i et lommetørkle eller annet papir 3-5 ganger slik at det oppnås en jevn spraydusj. Vend sprayen bort fra deg. Hvis sprayflasken ikke brukes på en stund, er det bra å kontrollere at sprayen er jevn ved å spraye 1-2 prøvespray.
3. Dra øvre del av ytterøret forsiktig bakover og oppover. Hold flasken loddrett med spraymunnstykket plassert ved åpningen til øregangen. Spray 1-2 doser av Revaxør Olje ørespray inn i øregangen. Trekk øreflippen opp og ned forsiktig med en vridende bevegelse et par ganger.
4. Tørk av overflødig olje i det ytre øret f.eks. med et lommetørkle. Ikke bruk bomullspinner! Oljen som er blitt sprøytet inn i ørekanalen skal ikke skylles bort.
5. Løsne spraymunnstykket etter bruk, rengjør det med et mildt vaskemiddel, skyll godt med vann, tørk og sett det tilbake på flasken. **Sprayflasken skal aldri brukes uten at spraymunnstykket er på plass!**

ANDRE TING Å VÆRE OPPMERKSOM PÅ

Revaxør Olje ørespray er kun til personlig bruk. Revaxør Olje er kun til lokal bruk i øregangen. Dersom du bruker Revaxør Olje etter henvsining fra lege, må du følge anvisningene du har fått av legen din.

Dersom du har spørsmål angående bruk av Revaxør Olje, ta kontakt med lege, sykepleier eller apotek.

INNHold

Triglyserider av middels kjedelengde (0,40 mg/ml), isopropylpalmitat (0,35 mg/ml), hydrogenert polydecen (0,25 mg/ml)

OPPBEVARING

Oppbevares ved høyst 25°C.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Skal ikke brukes etter utløpsdatoen som er angitt på pakken.
Flasken bør brukes innen 6 måneder etter åpning.
Produktet skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Restene skal leveres til apoteket. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

PAKNINGSSTØRRELSER

Revaxør Olje 15 ml

TILVIRKER

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finland

DISTRIBUTØR I NORGE

Orion Pharma AS

Besøksadresse

Sandakerveien 130
NO-0484 Oslo
Norge

Postadresse

P.O.Box 4366 Nydalen
NO-0402 Oslo
Norge
Tel. +47 4000 4210
www.orionpharma.no

DENNE BRUKSANVISNING BLE SIST

OPPDATERT

06/2024



Medisinsk utstyr



Tilvirker




Les bruksanvisningen før bruk



Batch



Bruk innen

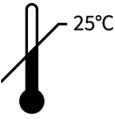

Øvre temperaturgrense



Advarsel



Unik utstyrsidentifikasjon



Tilvirkningsland



Distributør



Oversettelse

